

SHAMIR PRESENTE :

# THE FOG

DITES AU REVOIR À LA BUÉE

---



**Gardez une vue claire grâce à  
Shamir **Glacier™** Anti-Fog**



**shamir**

Perfect vision  
Personal touch



## **En plein brouillard**

Tout porteur de lunettes a déjà vécu l'expérience inconfortable d'une vision réduite à cause de la buée en face interne du verre, aveuglant temporairement la vue. Cette situation est gênante, dérangement voir dangereuse.

Cela peut se produire en allant en extérieur par temps froid, ou en entrant dans un environnement climatisé. Il arrive également que la buée se forme lors d'une activité sportive intense lorsque le corps émet beaucoup de chaleur et que l'humidité se trouve emprisonnée derrière le verre.

## Comment se forme la buée ?

Lorsque l'humidité du corps se trouve bloquée derrière les verres et que la température est inférieure à celle de l'air humide emprisonné, du brouillard apparaît derrière le verre.

De l'air humide chaud entre en contact avec une surface froide




## La solution : Shamir Glacier™ Anti-Fog

Le nouveau traitement de surface, Shamir Glacier Anti-Fog, empêche la formation de buée en face interne en absorbant les gouttelettes qui se forment naturellement sur le verre .

### Formation de la buée selon le traitement appliqué :


source lumineuse

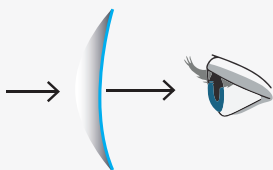

#### Shamir Glacier™ Anti-Fog

Les gouttelettes d'eau sont absorbées dans une mince couche lisse qui ne diffuse pas la lumière – une vision claire est maintenue.

source lumineuse

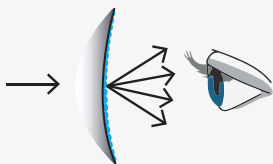

#### Traitement Antireflets ou durci HC standards

Les gouttelettes d'eau s'accumulent sur la surface du verre dispersent la lumière et perturbent la vision.



## ► Pour quel porteur ?

Shamir Glacier Anti-Fog convient à toute personne confrontée régulièrement à des soucis de verres embués en face arrière. Il s'agit souvent de patients qui :

- Pratiquent des sports en intérieur ou extérieur
- Exercent une profession physiquement soutenue
- Travaillent dans des environnements froids
- Portent des lunettes de sécurité
- Portent un masque



► Pour une protection supplémentaire, nous recommandons d'associer Shamir Glacier™ Anti-Fog avec l'un de nos traitements sur la face externe :

Glacier Sun UV™

Glacier Plus™

Flash & Power Mirrors



**Entretien**

**& disponibilité**

## **Comment garder propre vos verres traités avec Shamir Glacier™ Anti-Fog**

Nous recommandons de nettoyer chacune des faces du verre séparément.

Pour éliminer la saleté en face interne, utilisez un tissu humide puis sécher avec une chiffonnette sèche.

- Vous pouvez utiliser un spray nettoyant avec ou sans alcool mais **sans acétone**
- Ne pas passer sous l'eau.
- Ne pas utiliser d'acétone.
- Aucun spray spécial ni lingette n'est utile pour activer Shamir Glacier™ Anti-Fog ; **ce traitement anti buée est durable dans le temps**

### **Recommandations**

Dans des conditions prolongées de forte humidité, le traitement peut atteindre sa capacité maximale d'absorption :

- une fine couche d'eau ou de buée peut se former sur les verres
- essayez simplement les verres avec un chiffon doux.

Le traitement Anti-Fog retrouvera son pouvoir d'absorption initial et sa fonctionnalité optimale.

## Disponibilité

Shamir Glacier Anti-Fog peut être proposé avec des verres RX :

- en polycarbonate, Trivex, NXT, 1.6
- blancs, teintés, polarisant ou Transitions.

S'adapte à tous les types de montures.



**Le détourage par Shamir est obligatoire.**

	Auto Intelligence	Autograph III	Attitude III S&F	Autograph Plus	Spectrum 2.0	Attitude III Sy	Alite RX
Trivex		●	●	●	●	●	●
NXT Color / Varia / Pola				●			●
NXT Varia Pola / Mirror				●			●
Polycarbonate	●	●	●	●	●	●	●
Poly. TGEN8 & XTRActive		●	●	●	●	●	●
Poly. Color				●	●	●	●
Poly. Pola		●	●	●	●	●	●
Poly. VPF AmberGold		●	●	●	●	●	●
1.6 / 1.6 Pola	●	●	●	●	●	●	●
1.6 TGEN 8 & XTRActive	●	●	●	●	●	●	●
1.6 TGEN 8 Style Colors				●		●	●
1.6 Blue sun		●	●	●	●	●	●
1.6 Blue zero	●	●			●	●	●

## Important

Ne pas marquer avec de l'encre la face arrière du verre car les marquages ne pourront pas être retirés !

## Garantie

Shamir Glacier™ Anti-Fog est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication.

*Shamir Glacier Anti-Fog répond à la norme Européenne EN-166 - l'exigence de durée de maintien de la clarté du verre dans des conditions d'humidités contrôlées.*